

TAT-5000S Series

Profesionální modely


Bezklíčový uzamykatelný nástěnný držák

Návod k instalaci a použití


EXERGEN
TemporalScanner™




1. Držák je navržen tak, aby fungoval s funkcí uzamčení nebo bez ní. Chcete-li aktivovat funkci uzamčení, nainstalujte dodaný uzamykací mechanismus pomocí křížového šroubováku podle obrázku. Pro snadnější instalaci šroubu do podložky a západky otočte držák vzhůru nohama. Nasuňte západku na válcový distanční čep, poté na ni položte podložku a šroubem ji i s podložkou zašroubujte do plastového otvoru. Neutahujte nadměrně. Nadměrná síla může způsobit prasknutí nebo odření plastu.

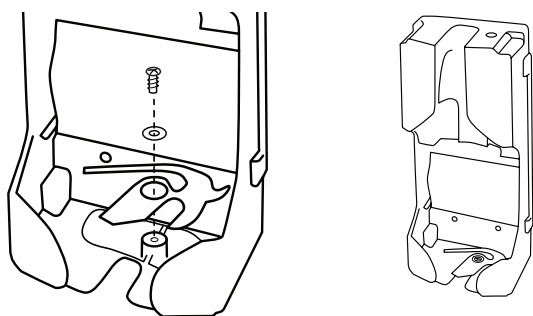


2. Pro správné zajištění všech modelů TAT-5000S použijte vložku.

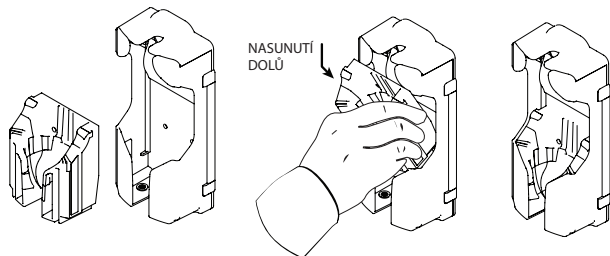


3. Přiložte nástěnný držák ke zdi a vyznačte polohy otvorů. Nasuňte vložku na uzamykací zařízení pro montáž na zeď a pevně jej připevněte ke zdi.
4. Nainstalujte přístroj do držáku podle obrázku tak, že jej zasunete do otvoru a palcem zatlačíte do uzamykací drážky. Uzamykací mechanismus by měl při zajištění cvaknout.

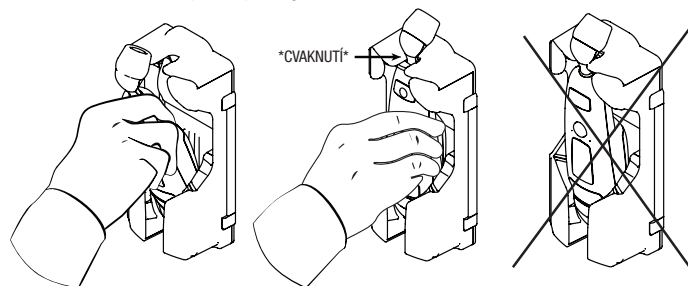


5. Chcete-li přístroj vyjmout, jednoduše zatáhněte za levou horní klapku směrem ven podle obrázku a přístroj vyjede otvorem ven.

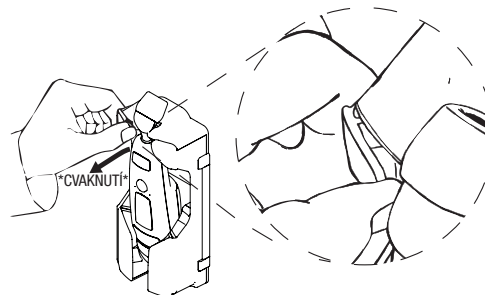


6. U přístrojů s ocelovým bezpečnostním kabelem pevně zašroubujte konec se závitem do držáku, jak je znázorněno na obrázku.

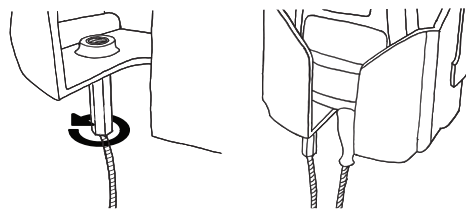

7. U přístrojů s navíjecím kabelem pevně přichyťte závitový konec do držáku, jak je znázorněno na obrázku.

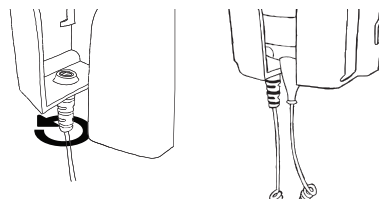

8. U nástěnných držáků s bezklíčovým uzamykáním a držákem víček můžete vyměňovat víčka tak, že sejmete kryt dávkovače podle obrázku a vložíte víčka. Víčko podle potřeby vyjmete tak, že zatáhnete za spodní část víčka směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku.

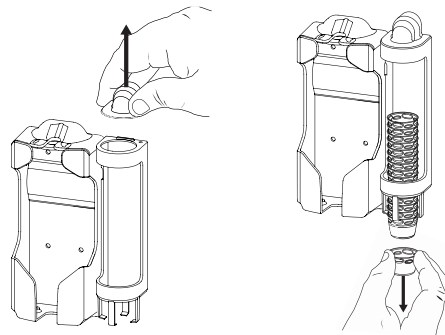

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA 02472



Vynalezeno, navrženo,
smontováno, otestováno a
zabaleno ve Spojených státech
amerických společností Exergen



Naskenujte pro přístup k další
dokumentaci a nejnovějším
klinickým studiím
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
doc p/n 818672-CZr3