

TAT-5000S-serien

Professionelle modeller


EXERGEN
TemporalScanner™




Nøglefri låsende vægmonteringsenhed

Installations- og brugervejledning

1. Monteringsenheden er designet til at fungere med eller uden låsefunktion. For at aktivere låsefunktionen skal du installere den medfølgende låsemekanisme ved hjælp af en Philips-skruetrækker som vist. Vend monteringsenheden på hovedet for at gøre det lettere at montere skruen gennem skiven og låsen. Sæt låsen over den cylindriske spacer, sæt derefter en skive på toppen, og monter skruen gennem skiven og låsen i plastikhullet. Undgå at spænde for hårdt. Overdreven kraft kan revne eller stribe plasten.

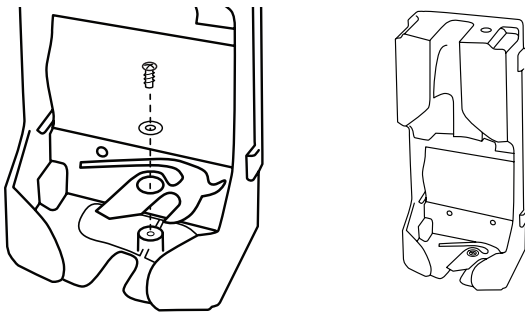


2. Brug indsatsen til at fastgøre alle TAT-5000S-modeller korrekt.

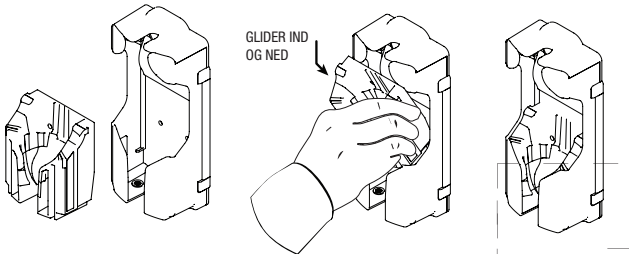


3. Juster vægmonteringsenheden til væggen, og marker hullernes placering. Sæt indsatsen i vægmonteringsenhedens låseanordning, og sæt den sikkert fast på væggen.


4. Sæt instrumentet i vægmonteringsenheden som vist ved at føre instrumentet gennem åbningen ved at skubbe instrumentet ind i låserillen med tommelfingeren. Låsemekanismen skal give et klik, når den kommer på plads.

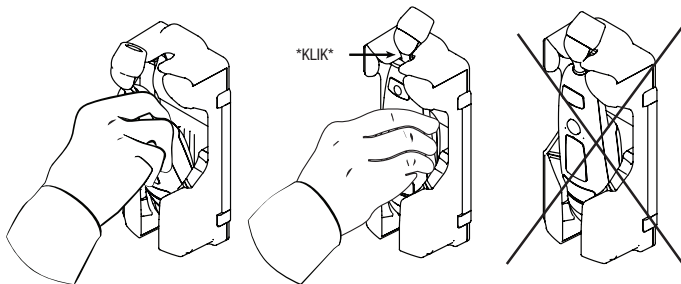


5. For at fjerne instrumentet skal du blot trække udad i klappen øverst til venstre som vist, og instrumentet kommer ud gennem åbningen.

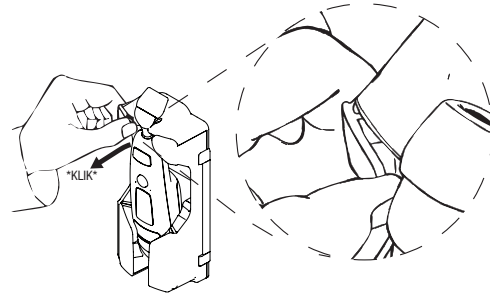


6. For instrumenter med stålsikkerhedskabel skal den gevindskårne ende sættes sikkert fast i vægmonteringsenheden, som vist.

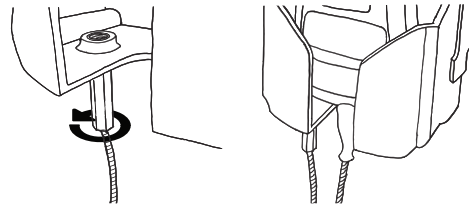

7. For instrumenter med spiralledning skal den gevindskårne ende sættes sikkert fast i vægmonteringsenheden, som vist.

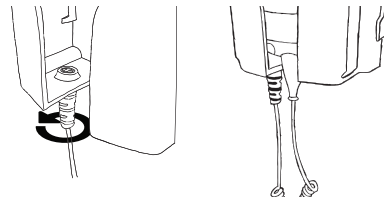

8. For nøglefri vægmonteringsenhed med medfølgende hættheolder skal hætterne fjernes som vist og hætterne sættes på igen. Fjern hætten efter behov ved at trække nedad på den nederste hætte som vist.

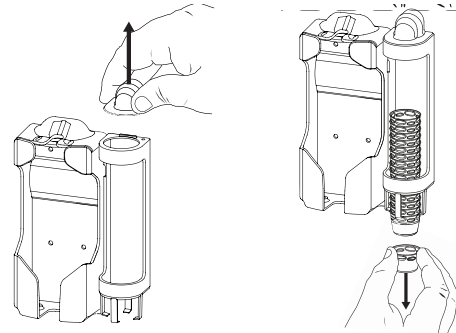

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA 02472



Opfundet, designet,
samlet, testet og
pakket i USA af
Exergen



Scan for at få adgang til
yderligere dokumentation og de
nyeste kliniske undersøgelser
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
doc p/n 818672-DKR3