

Série TAT-5000S

Modèles professionnels


EXERGEN
TemporalScanner™




Support mural verrouillable sans clé

Instructions d'installation et d'utilisation


1. Le support est conçu pour fonctionner avec ou sans la fonction de verrouillage. Pour activer la fonction de verrouillage, installez le mécanisme de verrouillage fourni à l'aide d'un tournevis Philips, comme indiqué. Pour faciliter l'installation de la vis à travers la rondelle et le loquet, retournez le support. Placez le loquet sur l'entretoise cylindrique, puis mettez la rondelle dessus, et installez la vis à travers la rondelle et le loquet dans le trou en plastique. Évitez de serrer excessivement. Une force excessive peut fissurer ou détériorer le plastique.

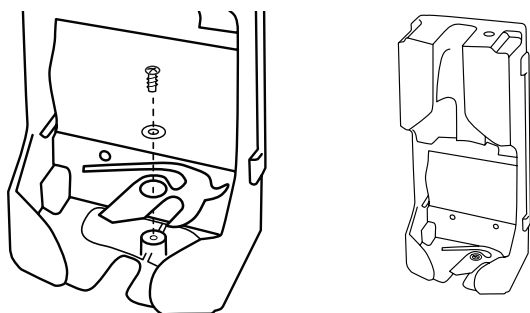


2. Utilisez l'insert pour fixer correctement tous les modèles TAT-5000S.

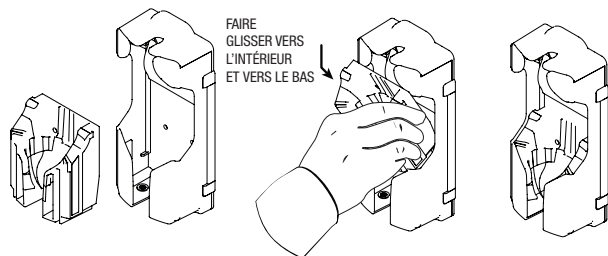


3. Alignez le dispositif de support mural sur le mur et marquer l'emplacement des trous. Ajoutez l'insert au dispositif de verrouillage du support mural et fixez-le solidement au mur.
4. Installez l'instrument dans le support comme indiqué en guidant l'instrument à travers l'ouverture et en poussant l'instrument dans la rainure de verrouillage avec votre pouce. Le mécanisme de verrouillage doit émettre un clic lorsqu'il s'enclenche.

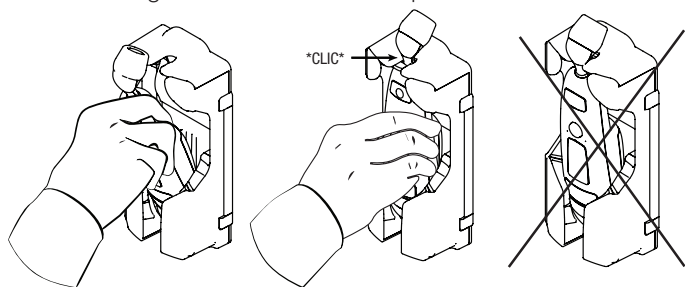


5. Pour retirer l'instrument, il suffit de tirer vers l'extérieur sur le rabat supérieur gauche comme indiqué, l'instrument sortira par l'ouverture.

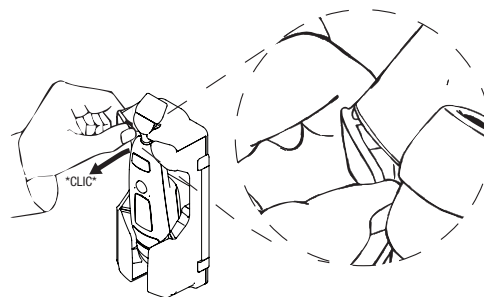


6. Pour les instruments équipés d'un câble de sécurité en acier, fixez solidement l'extrémité fileté dans le support, comme indiqué.

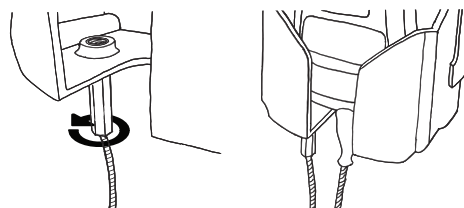

7. Pour les instruments dotés d'un cordon spiralé, fixez solidement l'extrémité fileté dans le support, comme illustré.

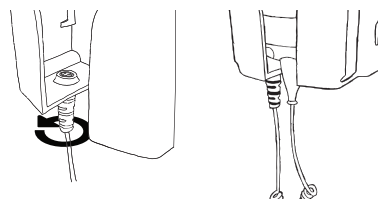

8. Pour les supports muraux verrouillables sans clé avec support de capuchon inclus, pour remplacer les capuchons, retirez le couvercle du distributeur comme indiqué et insérez les capuchons. Retirez le capuchon si besoin en tirant vers le bas sur le capuchon inférieur, comme indiqué.

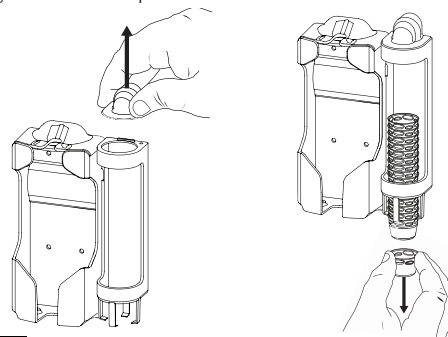

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA, 02472



Inventé, conçu,
assemblé, testé
et emballé aux
États-Unis par Exergen.



Scanner pour accéder aux
documents supplémentaires
et aux dernières études cliniques
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
doc p/n 818672-FRr3