

Serie TAT-5000S

Modelli professionali


EXERGEN
Temporal**Scanner**™




Montaggio a parete con bloccaggio senza chiave

Istruzioni per l'installazione e l'uso


1. Il supporto è progettato per l'uso con o senza la funzione di bloccaggio. Per attivare la funzione di bloccaggio, installare il meccanismo di bloccaggio in dotazione utilizzando un cacciavite Philips, come illustrato. Per facilitare l'installazione della vite attraverso la rondella e la chiusura, capovolgere il supporto. Posizionare la chiusura sul distanziatore cilindrico, quindi sistemare la rondella sopra e installare la vite attraverso la rondella e la chiusura nel foro di plastica. Evitare di stringere eccessivamente. Una forza eccessiva può incrinare o spaccare la plastica.

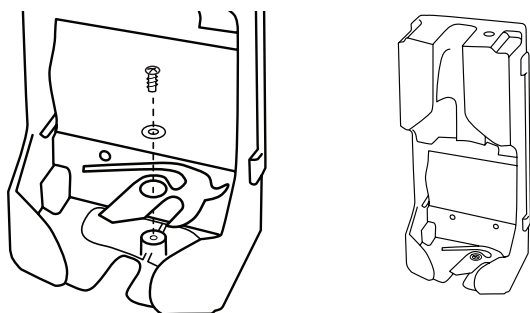


2. Utilizzare l'inserto per fissare correttamente tutti i modelli TAT-5000S.

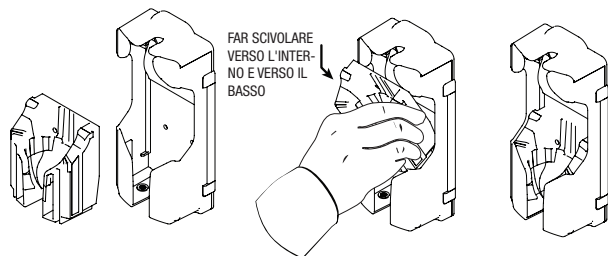


3. Allineare il dispositivo di montaggio alla parete e segnare le posizioni dei fori. Aggiungere l'inserto al dispositivo di bloccaggio per il montaggio a parete e fissarlo saldamente alla parete.
4. Installare lo strumento nel supporto, come illustrato, guidando lo strumento attraverso l'apertura e spingendolo con il pollice nella scanalatura di bloccaggio. Il meccanismo di bloccaggio deve emettere un clic quando scatta.

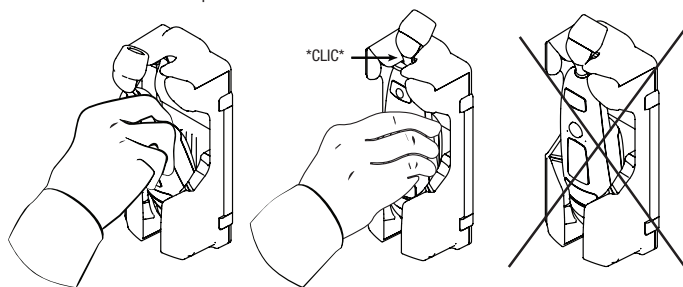


5. Per rimuovere lo strumento, è sufficiente tirare verso l'esterno l'aletta in alto a sinistra, come mostrato, e lo strumento uscirà dall'apertura.

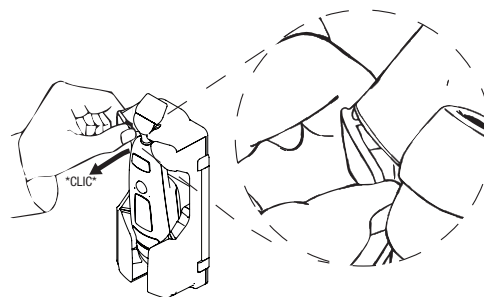


6. Per gli strumenti con cavo di sicurezza in acciaio, fissare saldamente l'estremità filettata nel supporto, come illustrato.

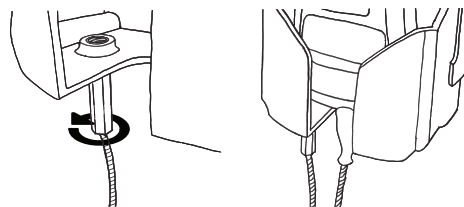

7. Per gli strumenti con cavo a spirale, fissare saldamente l'estremità filettata nel supporto, come illustrato.

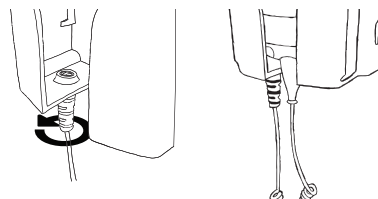

8. Nei supporti a parete con bloccaggio senza chiave dotati di portacappucci, rimuovere il coperchio del distributore, come mostrato, e inserire i cappucci per sostituirli. Per estrarre un cappuccio, quando necessario, tirare verso il basso quello inferiore, come mostrato.

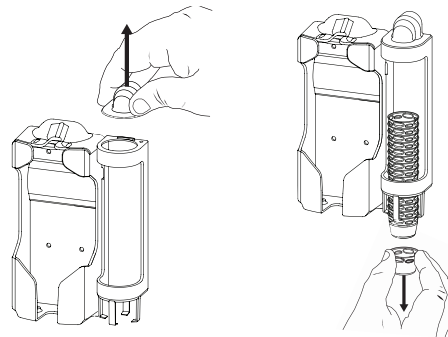

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA 02472



Inventato, progettato,
assemblato, testato
e confezionato negli
Stati Uniti da Exergen



Effettuare la scansione per
accedere alla documentazione
aggiuntiva e agli studi clinici
più recenti
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
doc p/n 818672-ITR3