


TAT-5000S-serie Professionele modellen

EXERGEN
TemporalScanner™




Sleutelloze vergrendelbare wandhouder Installatie- en gebruikersinstructies

1. De houder is ontworpen om met of zonder vergrendelfunctie te werken. Om de vergrendelfunctie te activeren, installeert u het meegeleverde vergrendelingsmechanisme met een kruiskopschroevendraaier zoals weergegeven. Voor eenvoudigere montage van de schroef door de ring en de vergrendelhaak draait u de houder ondersteboven. Plaats de vergrendelhaak over de cilindrische afstandhouder, leg vervolgens de ring erop en draai de schroef door de ring en de vergrendelhaak in het kunststof gat. Draai niet te strak aan. Overmatige kracht kan het kunststof doen scheuren of de schroefdraad beschadigen.

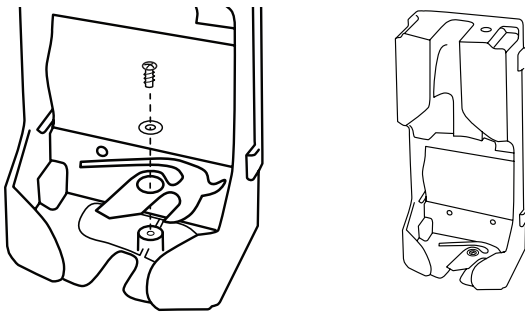


2. Gebruik het inzetstuk om alle TAT-5000S-modellen correct te bevestigen.

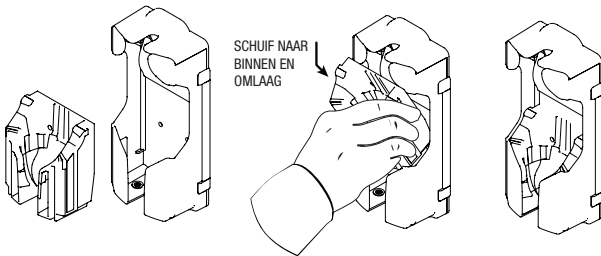


3. Lijn de wandhouder uit met de muur en markeer de boorpunten. Voeg het inzetstuk toe aan de vergrendelbare wandhouder en bevestig deze stevig aan de muur.


4. Plaats het instrument in de houder zoals weergegeven door het instrument door de opening te geleiden en het met uw duim in de vergrendelgroef te duwen. Het vergrendelingsmechanisme moet een klikgeluid maken wanneer het vastklikt.

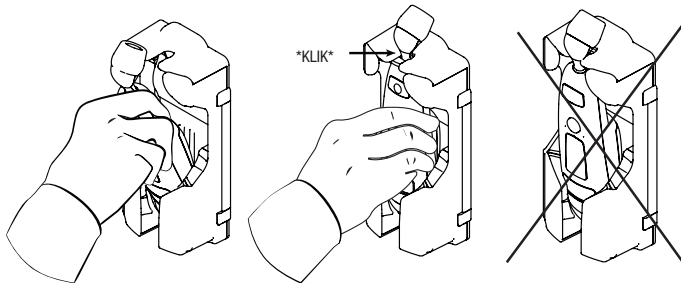


5. Om het instrument te verwijderen, trekt u eenvoudig naar buiten aan de linkerbovenflap zoals weergegeven; het instrument komt via de opening naar buiten.

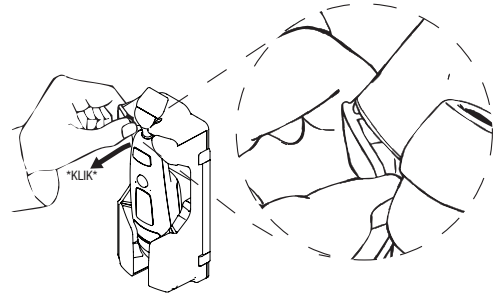


6. Voor instrumenten met een stalen beveiligingskabel: bevestig het schroefdraaduiteinde stevig in de houder zoals weergegeven.

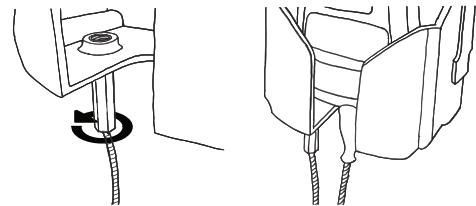

7. Voor instrumenten met een spiraalkabel: bevestig het schroefdraaduiteinde stevig in de houder zoals weergegeven.

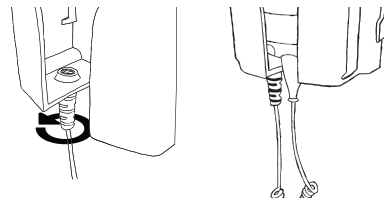

8. Voor sleutelloze vergrendelbare wandhouders met meegeleverde dophouder: verwijder om doppen te vervangen de dispenserafdekking zoals weergegeven en plaats de doppen. Verwijder een dop indien nodig door de onderste dop omlaag te trekken zoals weergegeven.

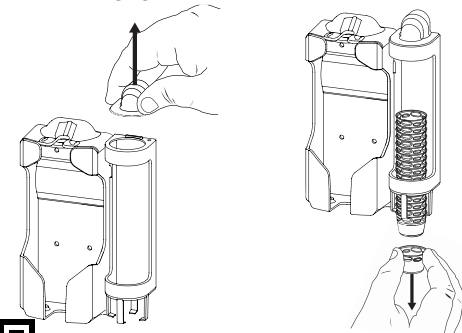

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA 02472



Uitgevonden, ontworpen,
geassembleerd, getest
en verpakt in de VS door
Exergen



Scan om toegang te krijgen tot
aanvullende documentatie en de
meest recente klinische studies
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
doc p/n 818672-NLr3