

Série TAT-5000S

Modelos profissionais


EXERGEN
TemporalScanner™




Suporte de parede com bloqueio sem chave

Instruções de instalação e de utilização

1. O suporte foi concebido para funcionar com ou sem a função de bloqueio. Para ativar a função de bloqueio, instale o mecanismo de bloqueio fornecido utilizando uma chave de fendas Philips, conforme ilustrado. Para facilitar a instalação do parafuso através da anilha e do trinco, vire o suporte ao contrário. Encaixe o trinco no suporte cilíndrico, depois coloque a anilha por cima e instale o parafuso através da anilha e do trinco no orifício de plástico. Evite apertar excessivamente. O uso de força excessiva pode rachar ou danificar o plástico.

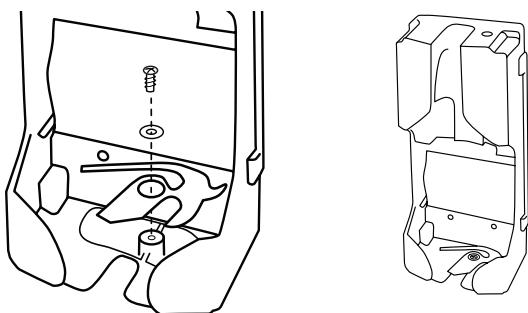


2. Utilize o encaixe para fixar corretamente todos os modelos TAT-5000S.

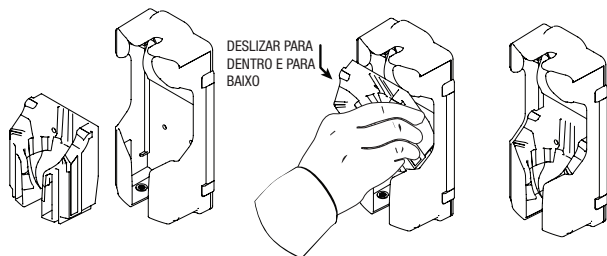


3. Alinhe o suporte de parede com a parede e marque os locais dos orifícios. Adicione o encaixe ao dispositivo de bloqueio do suporte de parede e fixe-o firmemente na parede.


4. Instale o instrumento no suporte conforme ilustrado, guiando-o através da abertura e empurrando-o para dentro da ranhura de bloqueio com o polegar. O mecanismo de bloqueio deve fazer um clique ao encaixar.

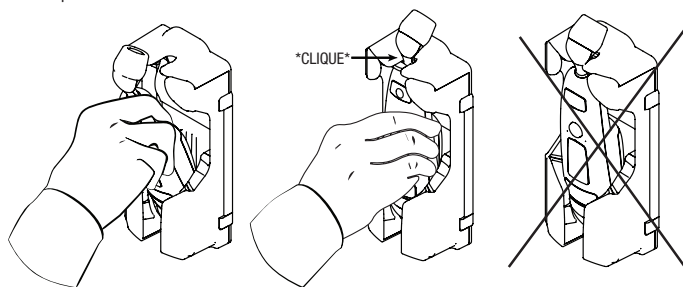


5. Para retirar o instrumento, basta puxar para fora a aba superior esquerda, conforme ilustrado; o instrumento sairá pela abertura.

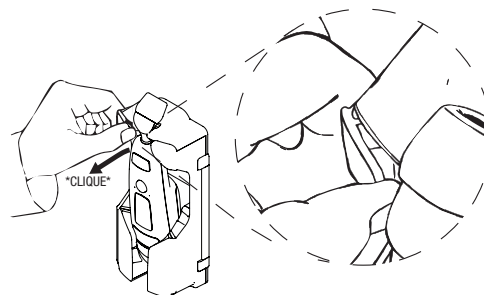


6. Para instrumentos com cabo de segurança em aço, fixe firmemente a extremidade roscada no suporte, conforme ilustrado.

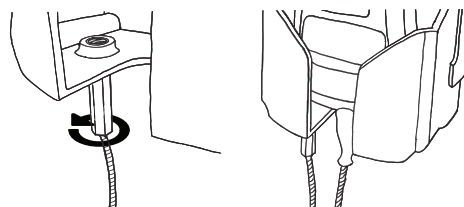

7. Para instrumentos com cabo em espiral, fixe firmemente a extremidade roscada no suporte, conforme ilustrado.

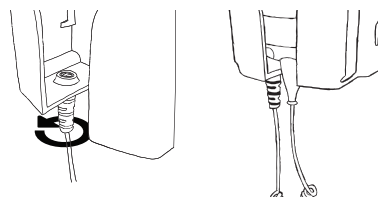

8. Para suportes de parede com bloqueio sem chave com suporte de capa incluído, para substituir as capas, retire a tampa do dispensador conforme ilustrado e introduza as capas. Retire a capa conforme necessário, puxando para baixo a capa inferior, conforme ilustrado.

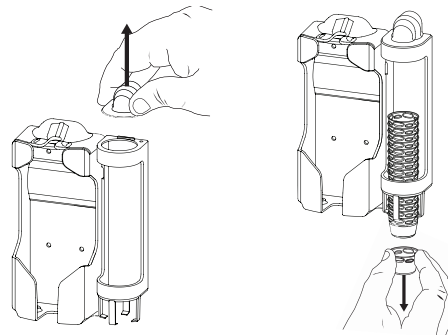

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA 02472



Inventado, concebido,
montado, testado
e embalado nos EUA
pela Exergen



Digitalize para aceder a
documentação adicional e aos
estudos clínicos mais recentes
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
doc p/n 818672-PTR3