

TAT-5000S-serien

Professionella modeller


EXERGEN
TemporalScanner™




Väggfäste med nyckelfri låsning

Installations- och användarinstruktioner


1. Fästet är utformat för att fungera med eller utan låsfunktionen. Aktivera låsfunktionen genom att montera den medföljande låsmekanismen med en stjärnskruvmejsel enligt bilden. För att skruven enklare ska kunna föras genom brickan och spärren kan du vända fästet upp och ned. Placera spärren över den cylindriska distansen, lägg sedan brickan ovanpå och skruva i skruven genom brickan och spärren och in i plasthålet. Dra inte åt för hårt. För stor kraft kan göra att plasten spricker eller att gängorna skadas.

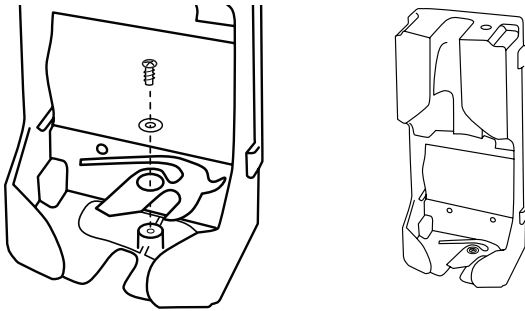


2. Använd insatsen för att fästa alla TAT-5000S-modeller ordentligt.

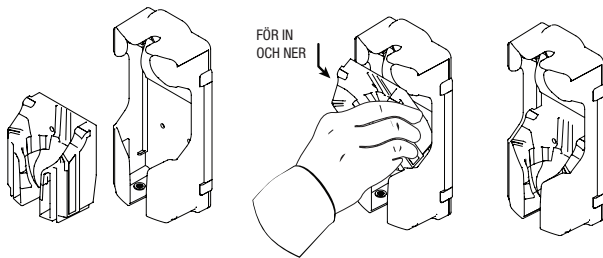


3. Rikta in väggfästet mot väggen och markera hållens placering. Sätt i insatsen i det låsbara väggfästet och fäst det ordentligt på väggen.
4. Montera instrumentet i fästet enligt bilden genom att föra instrumentet genom öppningen och trycka in det i låsspåret med tummen. Låsmekanismen ska klicka till när den snäpper fast.

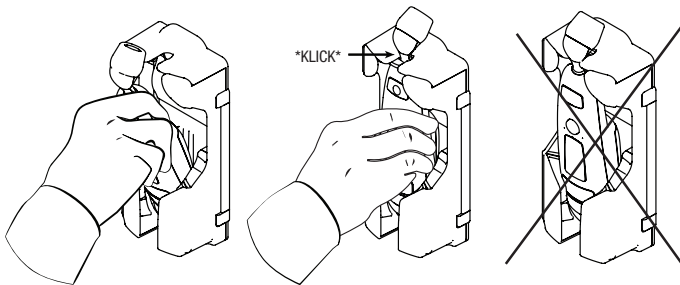


5. Ta bort instrumentet genom att dra den övre vänstra fliken utåt enligt bilden. Instrumentet kommer då ut genom öppningen.

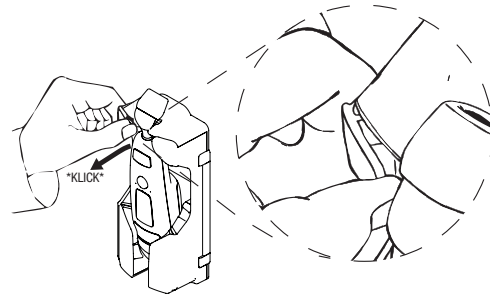


6. För instrument med säkerhetsvajer av stål: fäst den gängade änden ordentligt i fästet enligt bilden.

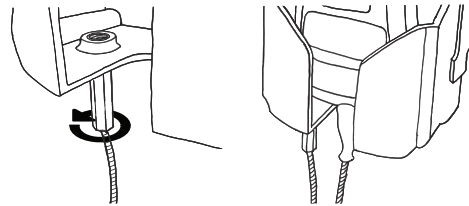

7. För instrument med spiralsladd: fäst den gängade änden ordentligt i fästet enligt bilden.

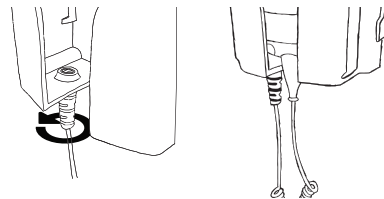

8. För nyckelfria låsbara väggfästen med medföljande lockhållare: byt lock genom att ta bort dispenserhöljet enligt bilden och sätta i locken. Ta bort ett lock vid behov genom att dra nedåt i det nedersta locket enligt bilden.

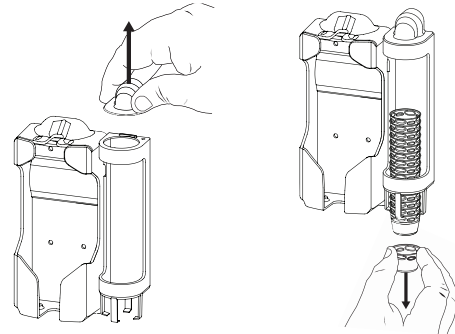

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA 02472, USA



Uppfunnen, utformad,
monterad, testad och
förpackad i USA av
Exergen



Skanna för att få tillgång till
ytterligare dokumentation och
de senaste kliniska studierna
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
Art.nr för dok. 818672-SER3