


TAT-5000S Serisi Profesyonel Modeller

EXERGEN
TemporalScanner™




Anahtarsız Kilitli Duvar Montajı Parçası Kurulum ve Kullanıcı Talimatları

1. Montaj parçası, kilitleme özelliği ile veya kilitleme özelliği olmadan çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kilitleme işlevini etkinleştirmek için, birlikte verilen kilitleme mekanizmasını bir Philips tornavida kullanarak gösterildiği gibi takın. Vidanın conta ve mandal içinden geçerek daha kolay takılması için Montaj parçasını ters çevirin. Mandalı silindirik çıkıntının üzerine oturtun, ardından contayı üstüne yerleştirin ve vidayı contadan ve mandaldan geçirerek plastik deliğe takın. Aşırı sıkmaktan kaçının. Aşırı kuvvet plastiği çatlatabilir veya soyabilir.

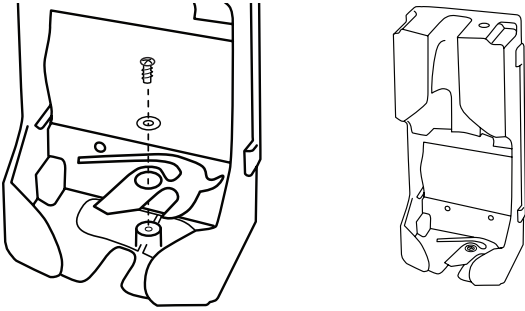


2. Tüm TAT-5000S modellerini uygun şekilde sabitlemek için ek parçayı kullanın.

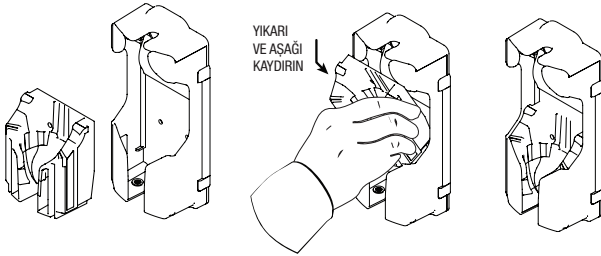


3. Duvara Montaj cihazını duvara hizalayın ve delik konumlarını işaretleyin. Duvara montaj kilitleme cihazına ek parça ekleyin ve duvara sıkıca tutturun.


4. Aleti başparmağınızla kilitleme oluğuna iterek açıklıktan geçirin ve Aleti gösterildiği gibi Montaj Parçasına takın. Kilitleme Mekanizması otururken tık sesi çıkarmalıdır.

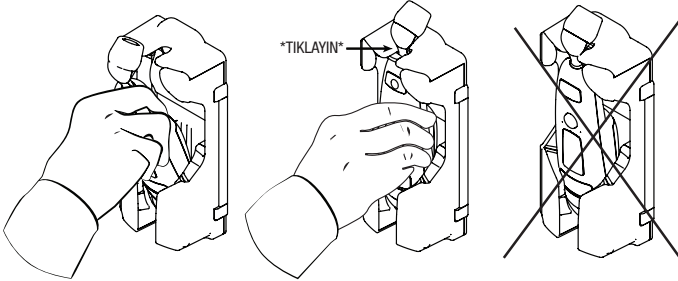


5. Aleti çıkarmak için, gösterildiği gibi sol üst kapağı dışarı doğru çekmeniz yeterlidir, Alet açıklıktan çıkacaktır.

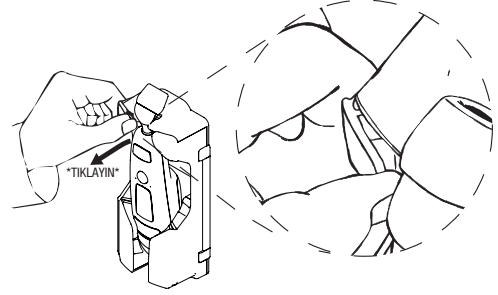


6. Çelik Güvenlik Kablosu olan Cihazlar için, dişli ucu gösterildiği gibi Montaj Parçasına sıkıca takın.

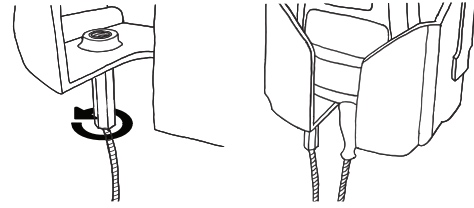

7. Sarmal Kablolu Aletler için, dişli ucu gösterildiği gibi Montaj Parçasına sıkıca takın.

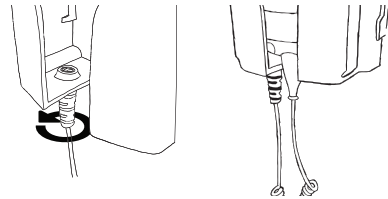

8. Kapak tutucusu ile birlikte verilen Anahtarsız Kilitli Duvar Montaj Parçalarında kapakları değiştirmek için, dispenser kapağını gösterildiği gibi çıkarın ve kapakları takın. Gerekliğinde alt kapağı gösterildiği gibi aşağı doğru çekerek kapağı çıkarın.

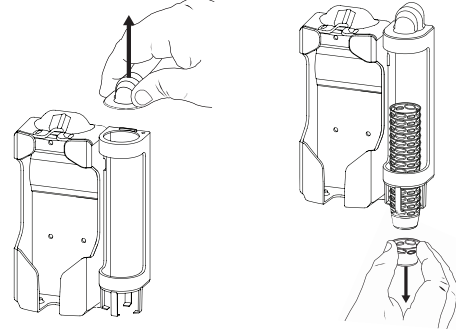

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA, 02472



Exergen tarafından ABD'de
icat edilmiş, tasarlanmış,
monte edilmiş, test edilmiş
ve paketlenmiştir



**Ek Belgelere ve En
Son Klinik Çalışmalara
Erişmek için Tarayın**
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
doc p/n 818672-TRr3